

**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию
стандартной модели челюстей с зубами
(POR01)**

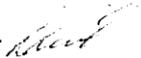


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 4 от 10 12 2024 г.

Руководитель ЦПН: Калменов Н.Д. 

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Модель	шт.	1
2	Отвертка	шт.	1
3	Руководство пользователя	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Протирать накладку чистой тканью, смоченной тёплой мыльной водой.
2. Дать высохнуть.
3. хранить модель в проветриваемом помещении.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Наименование: Стандартная модель челюстей с зубами (POR01).

Введение: Модель представляет собой типичный для взрослого человека зубочелюстной аппарат. Тип «Nissin».

Основа модели выполнена из твердой пластмассы, десна мягкие, розового цвета, 28 модольных зубов с прямыми корнями зафиксированы в модели при помощи винтовой фиксации. Стросние зубов (коронки и жевательных поверхностей) соответствует естественным зубам.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Характеристика

Зубы легко крепятся и снимаются при помощи фигурной отвертки со шлицом РНО - РНІ.

На нижней и верхней основе модели установлены металлические пластины, которые имеют резьбу Мб, для фиксации модели в фантомной голове, а также может крепиться и при помощи магнитной монтажной пластины.

Модель предназначена для имитации зубочелюстного аппарата пациента при обучении и отработки практических навыков в стоматологии, в средних и высших медицинских учебных заведениях.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		28/07-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Подготовка тренажера к эксплуатации

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте тренажер на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности.